

VIBRO


A vibro terapia tornou-se reconhecida por um assunto de épocas antigas, que por séculos, amadureceu e atualmente vem sendo praticado por muitas nacionalidades e de várias maneiras diferentes.

Ela consiste em um sistema que utiliza micro usinas de pulsos mecânicos e eletrônicos, dispostas estrategicamente em pontos que atingem os membros superiores e inferiores. Isso faz com que durante o uso, sejam sentidas ondas de pulsos vibratórios percorrendo todo o corpo.

Consulte regularmente seu médico e observe as orientações contidas no manual de instruções com atenção.

QUÂNTICO (OPCIONAL)

Oferece a você o moderno sistema do bioquântico, onde será imantado de 50 Hertz a 54 Hertz Pulsivo para seu organismo.

Ao pressionar a tecla Quântico  indicará no display se a função está ativada ou desativada.


O sistema possibilita ligar a energia bioquântica juntamente com a vibro, após o desligamento automático da vibro, a energia bioquântica continua ligada pelo tempo selecionado (6 ou 12 horas). O sistema de energia quântica é um produto gerador de ondas quadradas, que trabalha com um micro controlador, gerando uma frequência com intervalos de 6 com 6 segundos de 25 em 25 segundos, compreendendo valores que vão de 7.86 Hz a 85 Hz com passos de transições de 2 em 2 Hz. O sistema quântico é pulsátil, não polarizado e não ionizante.

É um sistema totalmente seguro, que obedece às diretrizes mundiais de segurança.

Informações TÉCNICAS

- Campo Eletromagnético: 400 miligauss
- Tipo de onda: Quadrada, Pulsátil, Não Polarizada e Não Isolante;
- Fonte: 12VDC 1,25^a
- Bivolt
- Cabo AWG 7 vias
- Consumo máximo 14,4 W (Aproximado)
- Capacidade em horas: Indeterminado
- Material: Abs
- Sistema de inserção SMD
- Produto produzido e fabricado no Brasil

Manual BASIC TOUCH SENSE



Funções do CONTROLE

- Touch Sense: Revolucionário sistema que acionam as funções desejadas com um leve toque;
- Liga / Desliga;
- Tempo de massagem: 15 ou 30 minutos;
- Quântico (Opcional): 6 ou 12 horas;
- Potência: Mínima, Média e Máxima;
- Lado: Direito / Esquerdo (Bilateral);
- Pontos: 4 Pontos com 15 ciclos de massagem.

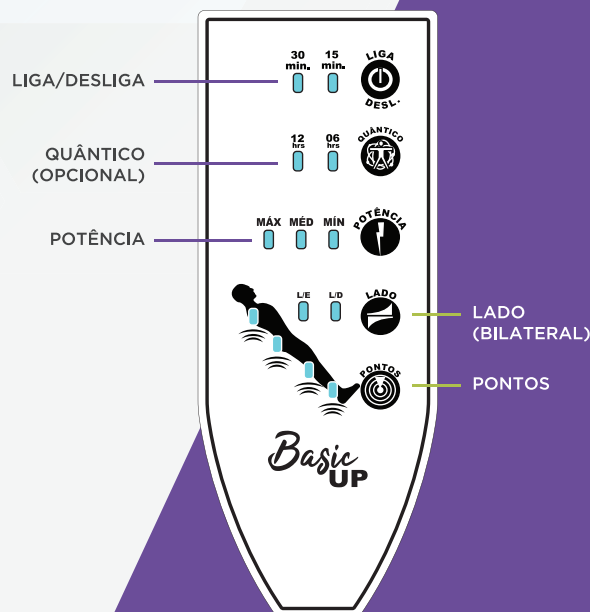


Imagem meramente ilustrativa

Massificador ELETRÔNICO

LIGA/DESLIGA Ao acionar liga / desliga, o sistema de massagem ficará ligado por 15 ou 30 minutos. O Led aceso indicará o tempo escolhido. Após este período, a massagem desligará automaticamente.

QUÂNTICO A Energia Quântica pode ser utilizada por um período de 6 ou 12hrs, com a massagem ligada ou desligada, basta acionar a tecla “quântico”, e selecionar o tempo desejado. O Led aceso indicará o tempo escolhido. Após este período, a energia quântica desligará automaticamente.

POTÊNCIA A “Potência” aumenta ou diminui a intensidade da massagem (vibro terapia). Possui três níveis: Mínimo, Médio e Máximo. O Led aceso indicará a intensidade escolhida. Para trocar a intensidade, basta acionar a tecla “potência” até o Led indicar a intensidade desejada.

LADO O controle Basic, possui sistema “Bilateral”, onde o usuário pode escolher em qual lado deseja receber a massagem: direito, esquerdo, ou ambos. Para escolher o lado desejado, basta acionar a tecla “lado” e o Led aceso indicará o lado escolhido.

LD = Lado direito
LE = Lado esquerdo

Sistema de MASSAGEM

Este produto possui 15 ciclos de massagens que foram desenvolvidas por profissionais da área de massoterapia, de forma a proporcionar um maior relaxamento, trazendo auxílio para o alívio do stress do dia a dia. A cada 1 minuto, o sistema troca de massagem automaticamente.

CONTRA INDICAÇÃO:

- Pessoas com Marca passo consultem seu médico antes do uso.

ESTE PRODUTO NÃO POSSUI FINS TERAPÊUTICOS.

ZONAS DE MASSAGEM:

Ao ligar seu controle serão acionados todos os motores, os Led's acesos abaixo do gráfico humano, indicarão os pontos onde a massagem está atuando.

PONTOS:

Seleciona os pontos do corpo o qual se deseja a massagem:

Ponto 1: A massagem neste ponto localiza: Cervical + Lombar

Ponto 2: A massagem neste ponto localiza: Coxas + Panturrilhas

Para selecionar o ponto desejado, basta acionar a tecla “pontos”, e o Led aceso indicará o ponto escolhido.



CERVICAL LOMBAR COXAS PANTURRILHAS